

Kassetten-Halterungen Typ B, W Cassette mountings type B, W



Abb. zeigt B-Halterung mit Kassette
Illustration shows B-mounting with cassette

Die Kassetten-Halterungen Typ B + W eignen sich ausgezeichnet für Röntgenaufnahmen ohne Laufraster. Sie sind aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium gefertigt und zeichnen sich durch hohe Stabilität, verbunden mit einem geringen Gewicht von nur ca. 2,5 kg aus. Im Gegensatz zu den R-Halterungen ist bei den B + W- Halterungen die untere Kassettenaufnahme in 5 cm Schritten durch Einraststifte höhenverstellbar.

Die B- Halterungen sind in 2 Grössen lieferbar:

- ◆ für Kassetten 18 x 24 bis 35 x 43 cm
- ◆ für Großkassetten von 60 – 120 cm Länge

Die W- Halterungen sind in 3 Grössen lieferbar:

- ◆ für Kassetten 18 x 24 bis 35 x 43 cm
- ◆ für Großkassetten von 60 – 120 cm Länge
- ◆ für alle Körperaufnahmen (Stangenlänge 210 cm)

Die Kassetten-Halterungen Typ B passen an festfokussierte Vertikalstative (z. B. Kehrli, Pausch).

Die Kassetten-Halterungen Typ W sind mit Bohrungen für Wandmontage ausgestattet und werden mit passenden Schrauben und Dübeln geliefert.

The cassette-mountings B + W are recommended for X-rays without sliding grids. They are made of high-quality anodized aluminium which guarantees a high grade of stability in spite of their low weight of approx. 2,5 kg. In addition to the R-mountings the lower cassette rail of type B + W is adjustable in height with pins (5 cm step).

The mountings type B are available for: - **cassettes 18 x 24 up to 35 x 43 cm (14 x 17 inch)**
- **large cassettes from 60 cm up to 120 cm.**

The mountings type W are available for: - **cassettes 18 x 24 up to 35 x 43 (14 x 17 inch)**
- **large cassettes from 60 cm up to 120 cm**
- **total body X-rays**

The mountings type B fits for fixed focused grid wall tripods (e. g. Kehrli, Pausch).

The cassette mountings type W are supplied with drill holes for wall mounting (screws and plugs incl.)

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in dem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.

All prints in this brochure are not binding and subject to alterations.

Les indications et figures dans ce prospectus s'entendent sans engagement. Nous réservons le droit d'y apporter des modifications.



rego X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING

Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>



Halterung Typ B für Raster und Kassetten mit Speicherfolien

In der digitalen Radiologie benötigt man für große Aufnahmen mit Speicherfolien (z.B. 35 x 84, 35 x 124 cm) auch entsprechende Raster. Da diese aber nicht wie bei der konventionellen Radiologie in die Kassette eingebaut werden können, muss man sie vor die Kassette stellen. Dies erfordert geeignete Halterungen.

Der Unterschied zu der umseitig beschriebenen Kassettenhalterung Typ B besteht in:

- tieferen Halteblechen zur Aufnahme von Kassette und Raster,
- U-förmigen Bügeln zum Einhängen am Rasterwandstativ.

Das Maß **X** (Tiefe des Rasterwandstativs) muss bei der Bestellung angegeben werden, ebenso ob das Rasterwandstativ vorne eine überstehende Oberkante hat (Dicke x Höhe).

Die B-Halterung ist in einer Größe lieferbar:

- für Kassetten von 18 x 24 bis 35 x 124 cm. (Abb.)

Andere Ausführungen, abgestimmt auf die Wünsche der Kunden, sind jederzeit möglich. Bitte anfragen.

Mountings type B for cassettes with imaging plates and grids

In digital radiology corresponding grids are necessary for large X-rays with imaging plates (e. g. 35 x 84 cm, 35 x 124 cm). As these can't be installed into the cassettes like in conventional radiology they have to be put in front of the cassettes. Thus suitable mountings are necessary.

The difference to the cassette mounting type B described overleaf is the following:


- deeper holding plates for accommodation of cassette and grid
- U-shaped bows for hanging up in the grid wall tripod

The size **X** (depth of the grid wall tripod) has to be indicated when ordering. Please indicate too if the grid wall tripod has a bleeding upper corner at the front side (thickness x height).

The cassette mounting type B is available in one size:

- for cassettes from 18 x 24 cm up to 35 x 124 cm (drawing)

However, other sizes according to customer's specifications are possible. Please send us your inquiries.

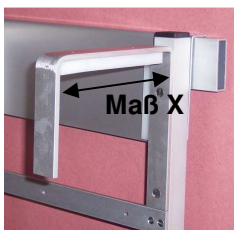

Das Maß **X** (Tiefe des Rasterwandstativs) muss bei der Bestellung angegeben werden.
The size **X** (depth of the grid wall tripod) has to be indicated when ordering.



rego X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING

Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

