


Einhandkassette Typ MVE one hander cassette type MVE



Aluminiumeinschubprofil

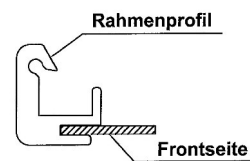

**Dieses Rahmenprofil garantiert
höchste mechanische und thermische
Beanspruchung.**

D

- einfaches Öffnen und sicheres Schließen durch Mittelverschluss und doppelte Einrastverriegelung
- lieferbar als MVE-blank, auf Wunsch auch mit Kohlefaserfront (ca. $\frac{1}{3}$ weniger Strahlenabsorption gegenüber Aluminium) lieferbar
- die MVE-Kassetten sind in jeder gängigen Größe sowie in Sonderformaten lieferbar
- als Fensterkassette mit EU- oder US-Fenster lieferbar
- auf Wunsch können alle Kassetten ab Werk mit blau- oder grünemittierenden Verstärkungsfolien geliefert werden
- nach DIN EN ISO 4090 : 2004-08 und IEC 60406.

GB

- easy opening and safe locking by middle locking device and double bolts
- available with blank frame (MVE-BL)
 - carbon fibre front plate (reduction of X-rays up to 35% compared to aluminium cassettes)
 - with or without EU- or US-window type
 - with or without blue or green emitting intensifying screens
- standard or special size
- according to DIN EN ISO 4090 : 2004-08 and IEC 60406.

Technische Beschreibung:

Frontseite: Aluminiumblech, einbrennlackiert RAL 7035
Rückseite: Aluminiumblech, blau lackiert
Rahmen: Aluminiumeinschubprofil
Scharniere: Aluminium
Verschluß: Aluminiumdruckgusslegierung
Andruckpolster: oberflächenversiegelter
PE – Schaumstoff (FCKW-frei)
Eckverbinder: ABS - Kunststoffspritzguss, schwarz
ab 60 cm Länge nur Aluminium-
druckgusslegierung


technical description:

front side: aluminium, painted white
back side: aluminium, painted blue
frame: aluminium profile
hinges: aluminium
lock: aluminium alloy
pressure pad: surface sealing PE foam

corners: ABS plastic injection
moulding, black,
length ≥ 60 cm only
aluminium alloy

Fenstertypen / types of windows


- **C1-N (EU-pin type)**
77 x 15 mm

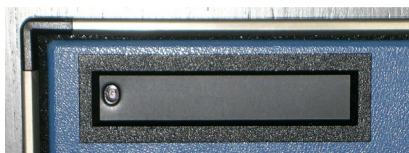

- **C1 (US-pin type)**
74 x 25 mm



- **C1-E (EU-pin type geöffnet/opened)**
74 x 16 mm

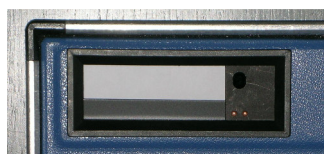

- **3M (pin type)**
64 x 16 mm



- **C3 (EU-magnetic type)**
64 x 16 mm



Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.
All prints in this brochure are not binding and subjects to alterations.

Vers.2-Gö



DIN EN ISO 9001 : 2008
REG.NR.: 292498 QM08

rego X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING
Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

